

ДІАГНОСТИКА ТА ГІГІЄНА



PARADISE
DENTAL TECHNOLOGIES

Лінда Міллер заснувала компанію PDT у Міссулі, штат Монтана, у 2000 році. Нині це другий за величиною виробник стоматологічних інструментів у Північній Америці, продукція якого доступна у 57 країнах.

Ручки PDT, з високоміцної полімерної смоли легкі та широкі, з вираженою рифленою поверхнею, що зменшує силу затискання та втому рук, одночасно підвищуючи тактильну чутливість.


Інструменти PDT виготовляються з кріогенно загартованої сталі, завдяки чому їхні кінчики міцніші, твердіші, довше залишаються гострими та легко заточуються.



З гордістю виробляємо у Міссулі, штат Монтана

На вході до нашого підприємства в Міссулі, ви побачите табличку з написом: "За цими дверима працюють найкращі у світі майстри зі створення стоматологічних інструментів".


Ми любимо те, що робимо, і нам приємно працювати з вами.

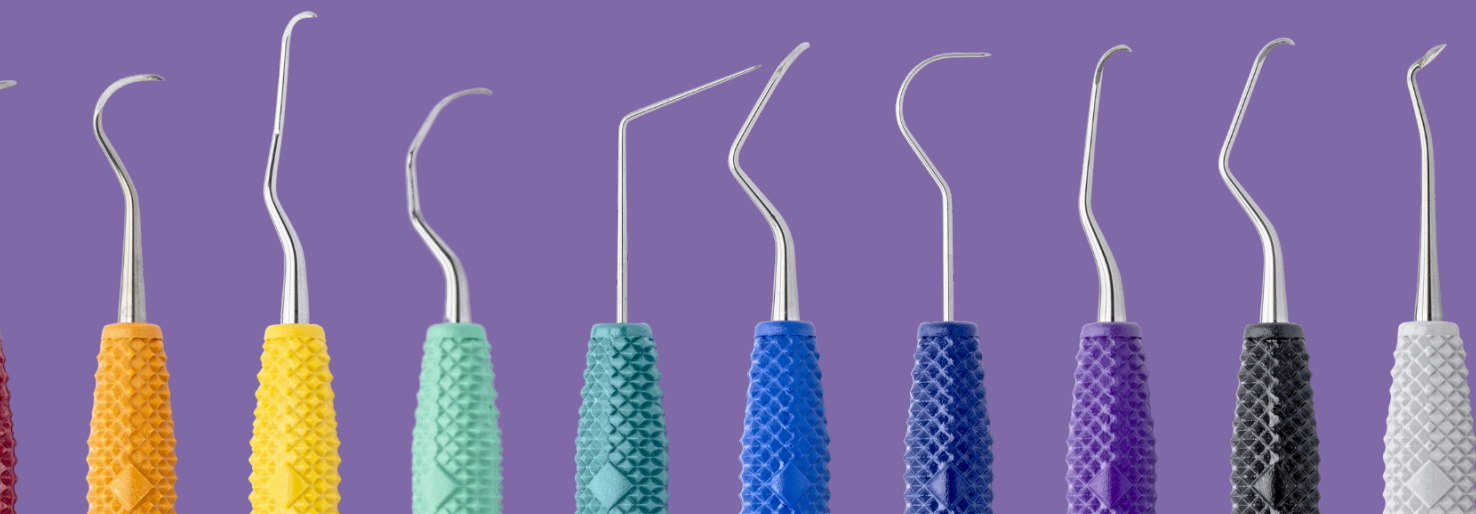

гігієна | діагностика | реставрація | хірургія | ендодонтія

ЕРГОНОМІЧНО. ЕФЕКТИВНО. РЕЗУЛЬТАТИВНО.

СЕРПОВИДНІ СКЕЙЛЕРИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ

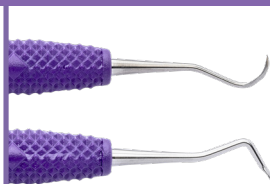

N1
R096



H6-7 ☀
R110



H5-33
R111



U15-33
R113



NEB 128
R114



NEB 128-33
R115



SE NEB 128
R116



Morse 0-00
R118



Скейлери PDT розроблені для видалення надясенних зубних відкладень. Два ріжучих краї, загострений кінчик та лицева поверхня, що розташована перпендикулярно до термінального стрижня.



MacFarlane 0-1
R121



MacFarlane 2-3
R122



JACK B. NIMBLE® R130 це невеликий кутовий скейлер із суцільно вигнутим лезом, що збільшує прямий контакт із поверхнею зуба. Це ідеальний інструмент для роботи зі скупченими зубами. Також чудово підходить для дитячої профілактики та видалення цементу.



JACK B. NIMBLE® SLIM R130S це тонша версія скейлера Jack B. Nimble®, розроблена для кращого доступу до міжпроксимальних ділянок при скупченості зубів. Його кутова форма та суцільно вигнуте лезо забезпечують збільшений контакт із поверхнею зуба. Більш щільний вигин і коротше лезо покращують адаптацію до анатомії фронтальних зубів, що робить його ідеальним для скейлінгу навколо брекетів, лінгвальних дуг і ретейнерів, а також для очищення надлишків матеріалу та цементу.



Jack B. Nimble® ☀
R130



Jack B. Nimble® Slim ☀
R130S



NEB 128-L5 Mini ☀
R093

СЕРПОВИДНІ СКЕЙЛЕРИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ "2 В 1"



H5-Langer5 **Скейлер/Кюрета** ☀️
R090



NEB 128-L5
R091



H5-L5 Mini ☀️
R092



23 (Загострений кінчик)
R098
Європейський дизайн



23 **Тонкий (Загострений кінчик)** R098S ☀️
Збалансоване, тонке лезо



N135
R119



Montana 4-5™ ☀️
R120



J34-35
R125



Cattoni 107-108
R129

СЕРПОВИДНІ СКЕЙЛЕРИ ДЛЯ ЖУВАЛЬНИХ ЗУБІВ



204 IUFW
R133



204S 
R135



N2
R139



Micro Sickle
R134



204SD
R136



220
R142



MT 4-5 R120 це фірмовий дизайн PDT, який має таку ж адаптацію, як і 204S, але є більш жорстким та має подовжений термінальний стрижень для кращого доступу до міжпроксимальних ділянок.




Єдиний. Унікальний. Оригінальний MONTANA JACK®



Montana Jack® ☀
R138



Montana Jack® Rigid ☀
R138R

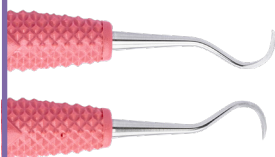

Montana Jack® **Рожевий** ☀
R138BC
Також доступний у Rigid
R138BCR



MONTANA JACK® R138 має ідеальний зворотний кут для оптимальної адаптації з дуже тонким, гострим і надміцним лезом, яке забезпечує зручний міжпроксимальний доступ.



MONTANA JACK® RIGID R138R має всі чудові характеристики Montana Jack®, але з товстішим стрижнем і лезом, що витримує більший тиск і має меншу гнучкість. Він чудово підходить для зняття масивних твердих відкладень.



MONTANA JACK® PINK R138BC це той самий Montana Jack®, але з кожної покупки Montana Jack® Pink компанія PDT робить благодійний внесок до Інституту дослідження раку.



ОПТИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ PDT

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
РЕСУРСУ ІНСТРУМЕНТІВ PDT ТА
СТАБІЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЯКОСТІ РОБОТИ

ІНСТРУКЦІЯ



01 ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ

Одразу після використання інструмент необхідно очистити від залишків біологічного матеріалу:

- Промивання під проточною водою
- Очищення м'якою щіткою
- Використання ферментних мийних засобів
- Ультразвукова обробка (за потреби)

Уникайте абразивних матеріалів, що пошкоджують поверхню інструменту

02 ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Засоби для дезінфекції повинні використовуватись згідно регламенту на засоби

Рекомендовано:

- Четвертинні амонієві сполуки (ЧАС)
- Ферментні засоби
- Розчини для чутливих матеріалів

Не рекомендовано:

- Хлорвмісні засоби
- Спирти понад 70%
- Феноли

Після дезінфекції інструмент необхідно ретельно промити водою та повністю висушити перед автоклавуванням

03 СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Стерилізація проводиться відповідно до клінічних стандартів.

- Автоклавування при температурі 121-134°C
- Використання стерилізаційних пакетів або касет

04 ЗАТОЧУВАННЯ

Регулярне заточування забезпечує точність та ефективність роботи.

Камінь Арканзас
Керамічні камені
Система **PDT Gleason**
Guide

Зберігайте оригінальний кут леза, уникайте перегріву та надмірного тиску

ВАЖЛИВО!

ВИКОРИСТАННЯ СУХОЖАРОВИХ
ШАФ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ,
ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ
ДО ПОШКОДЖЕННЯ
ІНСТРУМЕНТУ ТА ВТРАТИ ЙОГО
ВЛАСТИВОСТЕЙ.


УНІВЕРСАЛЬНІ КЮРЕТИ



Barnhart 1-2
R060




Barnhart 1-2 Rigid
R060R

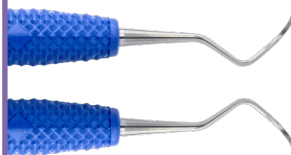


Barnhart 5-6 ☀
R061




Columbia 13-14 ☀
R064

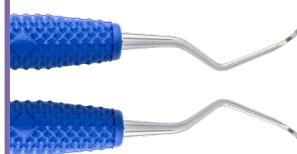


Columbia 2L-2R
R066

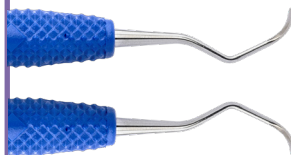


Columbia 4L-4R ☀
R067

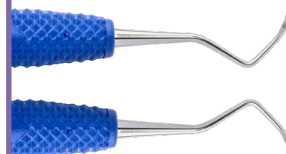

McCalls 13-14
R069

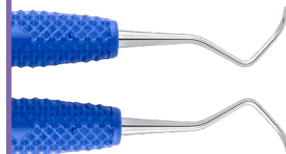


McCalls 13S-14S
R070

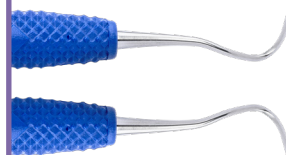


McCalls 17-18
R071


УНІВЕРСАЛЬНІ КЮРЕТИ

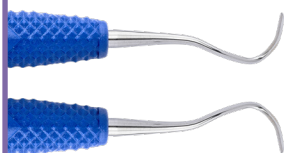

McCalls 17S-18S
R072

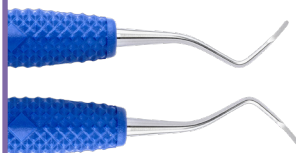

Rules 3-4
R076

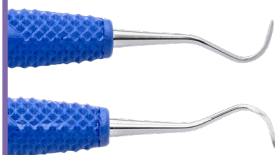

Younger-Good 7-8
R077



Langer 1-2
R079 (ТАКОЖ ДОСТУПНА У MINI R082)



Langer 3-4
R080 (ТАКОЖ ДОСТУПНА У MINI R083)




Langer 5-6
R081 (ТАКОЖ ДОСТУПНА У MINI R084)



Langer 17-18
R087 (ТАКОЖ ДОСТУПНА У MINI R088)



Mini Me™
R089

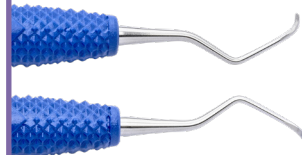

23A (Закруглений
кінчик) R099

QUEEN OF HEARTS™



Queen of Hearts™ ☀
R144



Створено у співпраці зі
Сьюзен Вінгроув (BS, RDH)



aitas.com.ua



QUEEN OF HEARTS™ R144 - це універсальна пародонтологічна кюрета, яка має довші ріжучі краї із закритою лицевою поверхнею, здатні досягати зон фуркації та важкодоступних увігнутостей кореня. Завдяки спеціальній ангуляції пацієнту не потрібно широко відкривати рот; ви можете легко дістати дистальних поверхонь молярів і обійти лінійний кут, а також використовувати цю універсальну пародонтологічну кюрету в усій порожнині рота. При правильній адаптації ручка виходить за межі рота, що підвищує комфорт пацієнта. Два ріжучих краї довжиною 6 мм легко ковзають у глибокі кишені, якщо ви вводите їх кінчиком, як зонд, а потім виконуєте горизонтальні та косі рухи. Queen of Hearts™ - це чудове доповнення до будь-якого набору для профілактики або пародонтологічного лікування дорослих, що максимізує ефективність роботи.

Ріжучий край
довжиною 6 мм легко
ковзає в глибокі кишені
при введенні кінчиком,
як зонд.



КЮРЕТИ O'HEHIR NEW MILLENNIUM™




O'Hehir New Millennium™
1-2 ☀
R150 Фронтальна



O'Hehir New Millennium™
1-2 ER ☀
R151 Фронтальна



O'Hehir New Millennium™
7-8
R152 Для премолярів

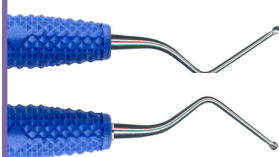

O'Hehir New Millennium™
9-10
R153 Універсальна



O'Hehir New Millennium™
17-18 ☀
R158 Дистальна



O'Hehir New Millennium™
19-20 ☀
R159 Мезіальна




H5 - O'Hehir 2 ER ☀
R160 Фронтальна



Створено у співпраці з
Трішою Е. О'Хехір (BS,
RDH)


КЮРЕТИ AMAZING GRACEYS™

ТИПИ ЛЕЗ

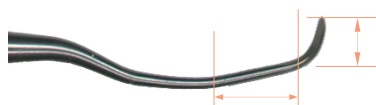


S

S - Standard (Стандартне): лезо Amazing Gracey 3,5-4 мм, яке забезпечує вдвічі більший контакт леза порівняно з традиційним дизайном кюрет Gracey.

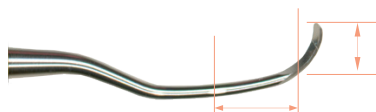

R

R - Rigid (Жорстке): стрижень великого діаметра робить інструмент міцнішим та менш гнучким зі стандартним лезом.

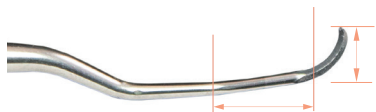

ER

ER - Extended Reach (Подовжений доступ): термінальний стрижень на 3 мм довший, стандартне лезо.



ERR

ERR - Extended Reach Rigid (Подовжений доступ жорстке): ті ж самі розміри, що й у ER, але з міцнішим, менш гнучким термінальним стрижнем.




ERM

ERM - Extended Reach Mini (Подовжений доступ міні): термінальний стрижень на 3 мм довший за стандартний, а лезо вдвічі коротше.



ERMR


ERMR - Extended Reach Mini Rigid (Подовжений доступ міні жорстке): ті ж самі розміри, що й у ERM, але з міцнішим та менш гнучким термінальним стрижнем.

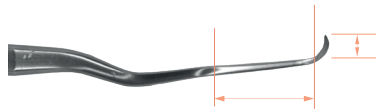

ERMM

ERMM - Extended Reach Micro Mini (Подовжений доступ мікро міні): лезо на 20% тонше та вдвічі коротше, з подовженим термінальним стрижнем.

Анатомічне кольорове кодування для швидкого розпізнавання та підготовки наборів

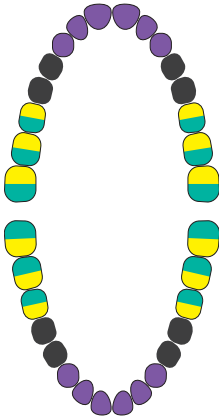

ITEM	S	R	ER	ERR	ERM	ERMR	ERMM
Amazing Gracey™ 00	R001	R001R					
Amazing Gracey™ 1-2	R016	R016R	R037		R010		R011
Amazing Gracey™ 3-4	R018		R052				
Amazing Gracey™ 5-6	R020	R020R			R003		
Amazing Gracey™ 7-8	R022	R022R			R004	R004R	R012
Amazing Gracey™ 9-10	R024				R005	R005R	
Amazing Gracey™ 11-12	R026	R026R	R042	R042R	R006	R006R	R013
Amazing Gracey™ 13-14	R028	R028R	R043	R043R	R007	R007R	R014
Amazing Gracey™ 15-16	R030	R030R	R044		R008	R008R	
Amazing Gracey™ 17-18	R032	R032R			R009		
Amazing Gracey™ 11-14 Quadrant Specific	R034	R034R	R046				
Amazing Gracey™ 12-13 Quadrant Specific	R036	R036R	R047				
A.Battrell™ Quadrant Gracey 15-18	R038						
A.Battrell™ Quadrant Gracey 16-17	R039						

КЮПЕТИ AMAZING GRACEYS™

 S R Amazing Gracey™ 0-0 R001 Фронтальна	 S R ERM Amazing Gracey™ 5-6 R020 Фронтальна	 S R ERM ERM ERM ERR Amazing Gracey™ 11-12 ☀️ R026 Мезіальна
 S R ERM ER ERMM Amazing Gracey™ 1-2 ☀️ R016 Фронтальна	 S R ERM ER ERMM Amazing Gracey™ 7-8 R022 Для премолярів	 S R ER Amazing Gracey™ 11-14 R034
 S ER Amazing Gracey™ 3-4 R018 Фронтальна	 S ERM ERM Amazing Gracey™ 9-10 R024 Для премолярів	 S R ER Amazing Gracey™ 12-13 R036

Більш результативні. Більш ефективні.


Усі леза кюрет Amazing Gracey™ від PDT адаптується до зуба порівняно з традиційним дизайном Gracey. Краща адаптація означає меншу кількість рухів під час скейлінгу. Краще для вас, краще для пацієнтів.




Amazing Gracey™ 13-14 ☀
R028 Дистальна




Amazing Gracey™ 15-16
R030 Для премолярів

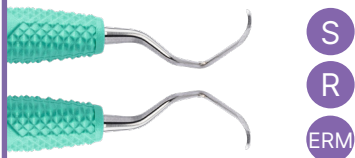

Amazing Gracey™ 17-18
R032 Дистальна

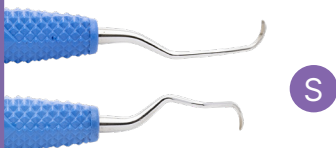

A. Battrell™
Quadrant Gracey 15-18
R038

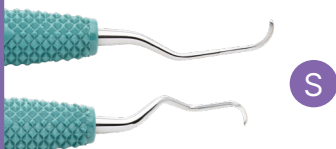

A. Battrell™
Quadrant Gracey 16-17
R039



A. Battrell™ Quadrant Gracey
Подвійний набір кюрет
R907



Створено на честь Енн
Баттрелл (MSDH, FADHA)

ДОГЛЯД ЗА ІМПЛАНТАТАМИ



Amazing Gracey™ Титанова з подовженим доступом Micro Mini 1-2 R694



Amazing Gracey™ Титанова з подовженим доступом Micro Mini 11-12 R695



Amazing Gracey™ Титанова з подовженим доступом Micro Mini 13-14 R696

Скейлери та Кюрети Micro Mini Gracey

Доведено, що вони не дряпають поверхню та ідеально підходять для імплантів та ділянок, куди не дістають більші леза. Леза Micro Mini на 20% тонші та вдвічі коротші за Gracey Mini, і мають подовжений термінальний стрижень. Тонкі леза достатньо міцні, щоб видаляти зубний камінь та цемент навколо імплантів.



Інструмент MONTANA JACK® Титановий R138T тепер доступний у титановому виконанні для догляду за імплантатами без подряпин. Рекомендується для використання на поодиноких коронках на імплантатах у жувальному відділі. Має тупий кінчик для додаткового захисту під час роботи з імплантатами.



**Montana Jack®
Титановий R138T**



НАБІР PINEYRO ARCH™ Ti

Набір The Pineyro Arch™ Ti R930

Набір включає всі чотири фірмові інструменти в касеті T005A-F FlipTop™ Cassette.

The Pineyro Arch™ Ti Набір без касети R931



Pineyro Arch™ Ti 1
R630



Pineyro Arch™ Ti 3
R632



Pineyro Arch™ Ti 2
R631



Pineyro Arch™ Ti 4
R633

Набір Pineyro Arch™ Ti


Чудовий гігієнічний доступ до незнімних конструкцій на імплантатах. Також може використовуватися для інших конструкцій на імплантатах, включаючи абатменти типу Locator, формувачі ясен та різьбу імплантату.

Використовуйте рухами вгору-вниз або з боку в бік. Не потребує заточування.



Створено у співпраці з доктором стоматології Альфонсо Пінейро, DDS


Універсальні титанові скейлери для імплантатів Wingrove™

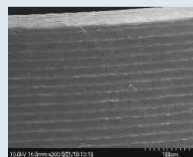


Контрольне фото імплантату Sybron



Залишки після універсального скейлера

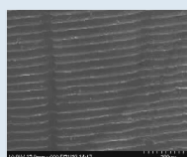

Загартований титановий скейлер конкурентів

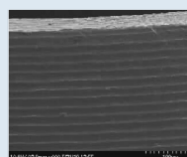

Відсутність пошкоджень після титанового скейлера PDT

Мікроскопічний вигляд імплантату до та після використання скейлера для імплантатів конкурентів, титанового скейлера конкурентів та титанового скейлера PDT Wingrove™.

Набір Wingrove™ “Go-To” Set R900 включає всі три спеціально розроблені інструменти, а також зонд EasyView™ T216, касету на 5 інструментів FlipTop™ T005A-F та керамічний камінь Diamond Head T061.



Сюзен Вінгроув, BS, RDH



Виготовлено з медичного титану виробництва США (марка 23), який підлягає повторному заточуванню. Тонкі кінчики розроблені для доступу до важкодоступних поверхонь навколо імплантатів.



Wingrove™ Barnhart 5-6 **Титановий** R661



Wingrove™ Langer 3-4 **Титановий** R680



Wingrove™ NEB 128-L5 Mini **Титановий** R693

СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ



Направляючий пристрій Gleason Guide™

T065

Найпростіша та найефективніша направляюча для заточування і відновлення форми інструментів з нержавіючої сталі. Універсальний інструмент "все в одному" для заточування широкого спектра інструментів.



Керамічний камінь Diamond Head Stone T061

Дрібнозернистий керамічний камінь, на якому не утворюються ямки чи борозни. Для заточування не потрібні олія або вода. Цей камінь призначений для підтримки форми та гостроти країв ваших інструментів.



Керамічний камінь Transformation Stone T062

Грубозернистий керамічний камінь, на якому не утворюються ямки чи борозни. Не потребує олії або води. Цей камінь призначений для відновлення форми країв ваших інструментів.



Набір для заточування Ultimate Edge™ T066



Набір Ultimate Edge™ з каменем Transformation Stone T068




Набір для відновлення форми Ultimate T067

Зробіть заточування простим: зупиніть, прикладіть, проведіть!


Три скошені направляючі грані: одна сторона для кюрет Gracey, інша для Універсальних/Серповидних інструментів, і ще одна для формування кінчика та заточування кюрет О'Нехір.

*Завжди використовуйте окремий камінь для титанових інструментів.


ЗОНДИ ДІАГНОСТИЧНІ

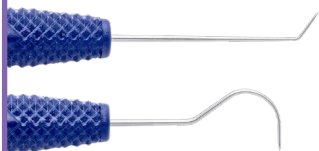

Зонд 6/23
R165

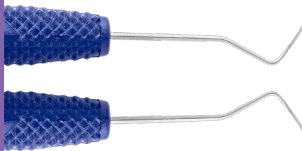

Зонд 2
R168

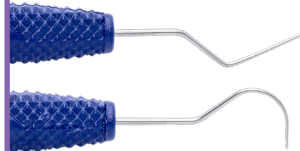


Зонд TUFTS 17-23
R171



Зонд 5 ☀
R166




Зонд ODU 11-12 ER R169
з подовженим доступом

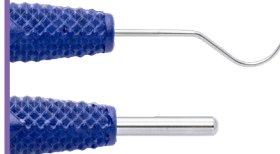

Зонд 23 ☀
R183



Зонд ODU 11-12 ☀
R167

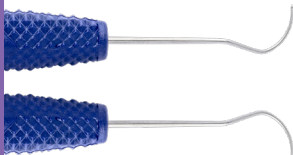

Зонд Montana ☀
R170




ЗОНДИ ПАРОДОНТОЛОГІЧНІ




Зонд 23/Probe 12S

3-6-9-12мм
R222

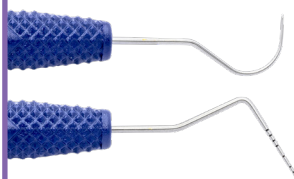

Зонд 23/Probe OW

1-2-3-5-7-8-9-10мм
R224

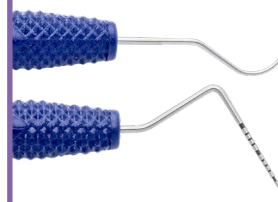


Зонд 23/Probe UNC 15

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15мм
R226




Зонд 23/Probe 12

3-6-9-12мм
R223

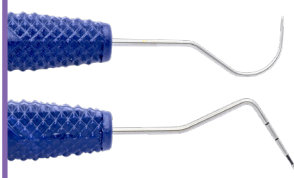

Зонд 23/Probe WHO

.5-3.5-5.5-8.5-11.5мм
R225

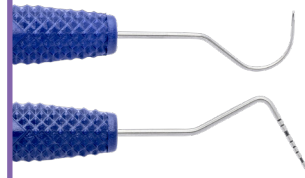

Зонд 23/Probe UNC 12

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12мм
R227


Діагностичні інструменти PDT мають міцні тонкі кінчики з пружинної сталі, забезпечують зручний доступ до проксимальних ділянок, відрізняються високою міцністю та гнучкістю. Вони створені для виявлення карієсу, зубного каменю та нерівностей поверхні зуба.




ЗОНДИ ПАРОДОНТОЛОГІЧНІ




Зонд Probe 11
3-6-8-11мм
R194

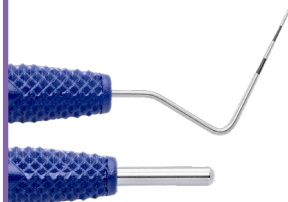

Зонд Probe 12 ☀
3-6-9-12мм
R195

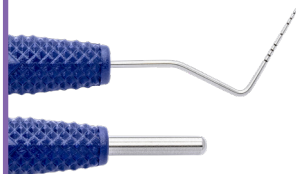


Зонд Probe OW
1-2-3-5-7-8-9-10мм
R196

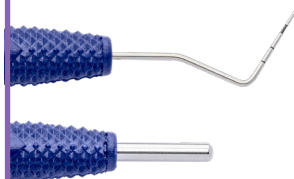


Зонд Probe WHO (для PSR)
.5-3.5-5.5-8.5-11.5мм
R197



Зонд Probe UNC 15
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15мм
R198

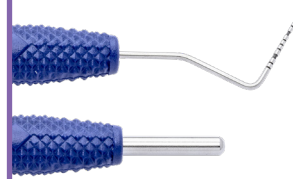

Зонд Probe UNC 12
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12мм
R199

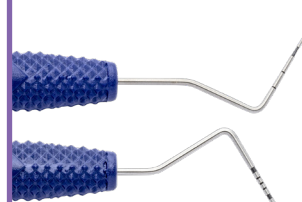

Зонд Probe WHO - UNC 15
Верх: .5-3.5-5.5-8.5-11.5мм
Низ: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15мм
R200

Усі пародонтальні зонди PDT мають довговічне маркування, нанесене за запатентованою технологією дифузії в поверхню сталі.

ЗОНДИ ПАРОДОНТОЛОГІЧНІ



Зонд Probe UNC 15 - CPITN

Верх: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15мм

Низ: .5-3.5-5.5-8.5-11.5мм

R201



Зонд Probe Nabers 2

3-6-9-12мм


R205



Зонд Goldman - Fox OW

1-2-3-5-7-8-9-10мм


R206

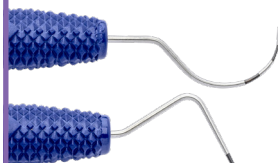

Зонд Probe Baylor 1-2

3-6-9-12мм

R207

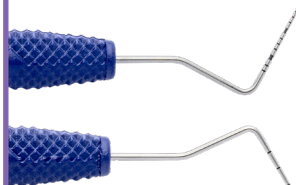

Зонд Probe UNC 12 - WHO

Верх: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12мм

Низ: .5-3.5-5.5-8.5-11.5мм

R210




Зонд ACE™ - UNC 15

Верх: 3-6-9-12мм

Низ: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15мм

R214

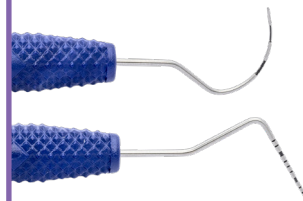

Зонд ACE™ - UNC 12

Верх: 3-6-9-12мм

Низ: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

R215



Зонд ACE™ 12 Short ☀

Верх: 3-6-9-12мм

Низ: 3-6-9-12мм

R216



Пародонтальні зонди ACE™
були розроблені у співпраці
зі Сьюзен Вінгроув, BS, RDH

ЗОНД HAWKEYE




Зонд 12 OAD Hawkeye ☀
3-6-9-12mm
R217

Зонд 12 OAD Hawkeye

R217

Зонд 12 OAD Hawkeye здатний огинати опуклі ділянки емалі для більш точного вимірювання пародонтальних показників. Цей зонд має інноваційний кутовий вигин, що полегшує доступ до пародонтальних ділянок для оцінки клінічного прикріплення, особливо в жувальному відділі. Він має стандартне маркування 3-6-9-12 мм на обох кінцях і виготовлений із високоякісного тонкого хірургічного металу для забезпечення легкості доступу та довговічності.

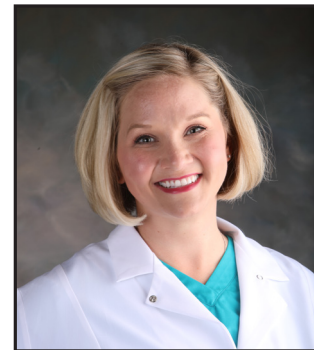

Зонд Hawkeye
створено у співпраці з
доктором Емілі Бодж
EdD, RDH, CDA, FAADH

ПЕРІО ЗОНДИ ДЛЯ ІМПЛАНТАТІВ

ЗОНДИ EASYVIEW™ PROBES



Зонд EasyView™ Probe
3-6-9-12mm
T212




Зонд EasyView™ Probe
3-5-7-10mm
T214



Зонд EasyView™ Probe
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm
T216

Ці яскраві жовто-зелені легкі полімерні зонди є гнучкими для забезпечення комфорту та точності. Безпечні для використання навколо імплантатів. Зонди EasyView™ Probes повторюють контур зуба, мають яскраве маркування, що легко читається, і забезпечують більший комфорт для пацієнта.

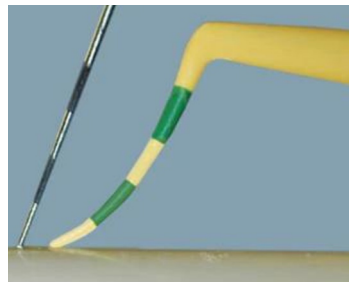

ДЗЕРКАЛА ТА ПІНЦЕТИ



Дзеркало
PrecisionReflect™ HD
двостороннє №5 T055



Дзеркало
PrecisionReflect™ HD
№5 (15/16")
конусна різьба
T050



Дзеркало
PrecisionReflect™ HD
№4 (7/8")
конусна різьба
T051



Ручка для дзеркала з
конусною різьбою
Доступна також із простою різьбою
Simple Stem R248
R245



Пінцет COLLEGE
T040



Суцільний пінцет
College з U-подібним
вигином
T043



Пінцет MERIAM
T042




Пінцет з
фіксатором для
ватних валиків
T045



ІНСТРУМЕНТИ PDT мають анатомічне кольорове кодування для швидкого розпізнавання та підготовки наборів

Насичений фіолетовий		Фронтальні
Тихоокеанський синій		Діагностичні
Морський синій		Універсальні
Карибський зелений		Дистальні
Сонячний жовтий		Мезіальні/Жувальні

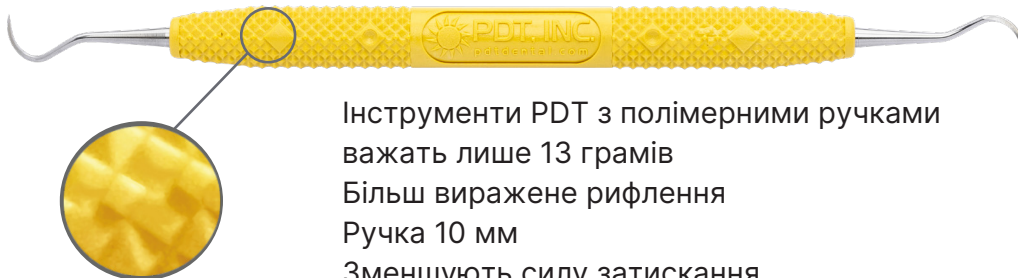

Інструменти PDT з полімерними ручками
важать лише 13 грамів
Більш виражене рифлення
Ручка 10 мм
Зменшують силу затискання
Знижують втому рук



www.aitas.com.ua
sales@aitas.com.ua
@aitasplus

(050) 435-42-90
(067) 360-82-28
33001, Україна, м.Рівне
вул. Дубенська, БОС 21

Офіційний представник в Україні